

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktiere uns  
Email: [support@betachek.com](mailto:support@betachek.com)

# BETACHEK® C50

Alles in einem Blutzuckermessgerät  
***Schnellstartanleitung***



**Klicken Sie hier,  
um Videoanleitungen anzusehen**



Laden im  
**App Store**



JETZT BEI  
**Google Play**

**NDP**

# Inhalt

---



**Zusammenfassung der Teile**

**Bereiten Sie das Messgerät vor**

**Uhrzeit und Datum einstellen**

**Verbinden mit der App**

**Führen Sie einen Test durch**


**Reinigen Sie das Messgerät E-4,  
E-5, E-9, E-12**

**Schlüssel zu Fehlermeldungen**

# Zusammenfassung der Teile



- 1. Sensorabdeckung
- 2. LCD Bildschirm
- 3. Schaltfläche „Einstellungen“
- 4. Speicherabruf-taste
- 5. Einstellrad für Eindringtiefe
- 6. Lanzettenhalter
- 7. Lanzette
- 8. Lanzettenauswerfer

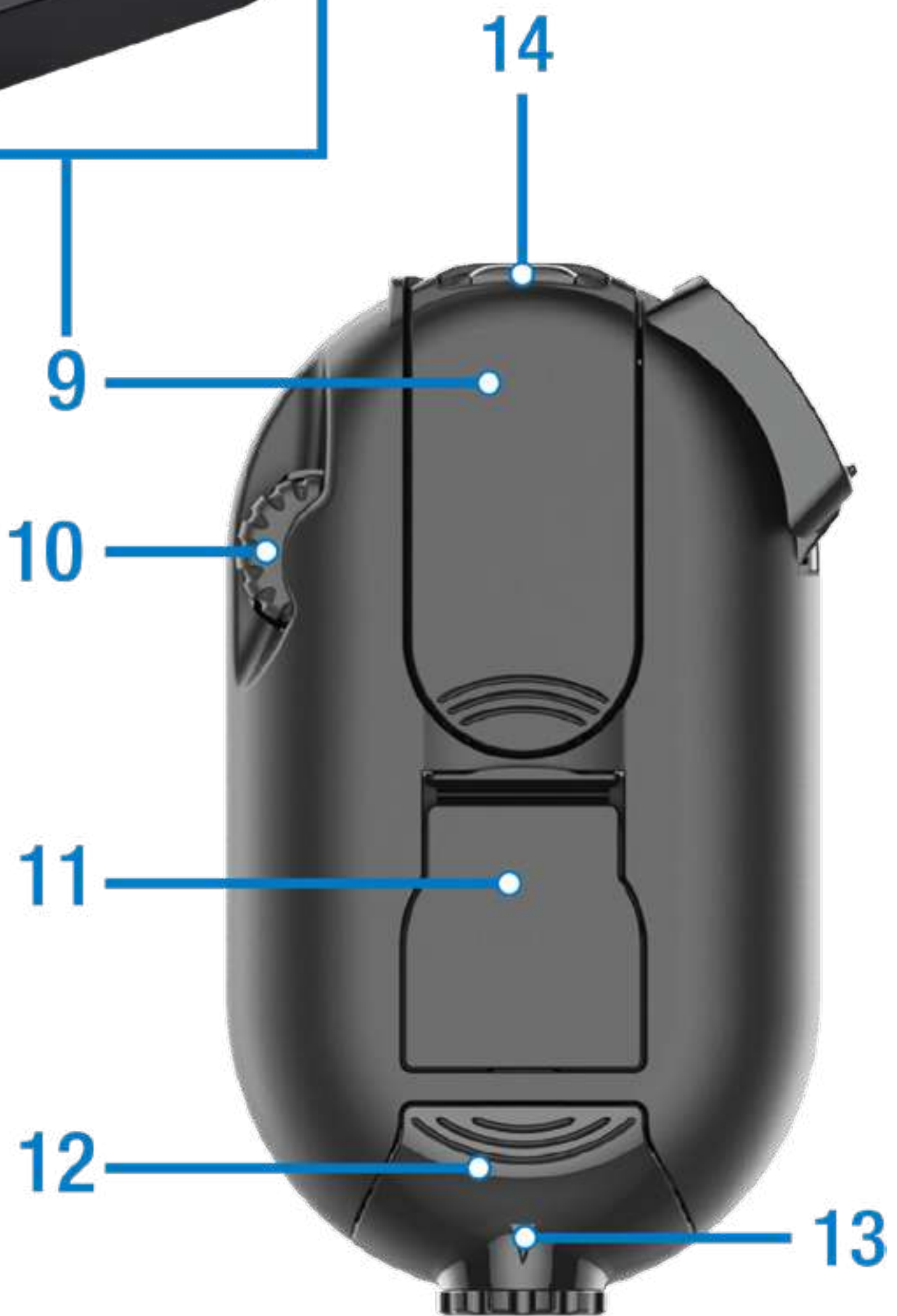

- 9. Testkassette
- 10. Daumenrad
- 11. Batterieabdeckung
- 12. Lanzettenabdeckung
- 13. Eindringtiefenanzeige
- 14. Sensor



# Bereiten Sie das Messgerät vor

1

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm ab

Ziehen Sie die Schutzlasche von der Batterie Abteil



2

Schieben Sie die Sensorabdeckung bis zum Anschlag nach links. Das Messgerät schaltet sich ein.



**3**

**Legen Sie die Kassette mit dem abgerundeten Ende zuerst ein und drücken Sie sie flach. Sensorabdeckung schließen.**



**4**

**Schieben Sie die Lanzettenabdeckung auf**



5

Lanzette einsetzen und Kappe abdrehen



6

Schließen Sie die Lanzettenabdeckung und stellen Sie die gewünschte Eindringtiefe ein





# Uhrzeit und Datum einstellen

1

Halten Sie die S-Taste gedrückt, um das Einstellungs Menü aufzurufen.



Das Messgerät kann anzeigen „exp“ (Kassette abgelaufen) wenn das korrekte Datum nicht eingestellt ist




**VIDEO 1**



2

Drücken Sie M, um das blinkende Zeichen zu ändern. Drücken Sie S zum Speichern.

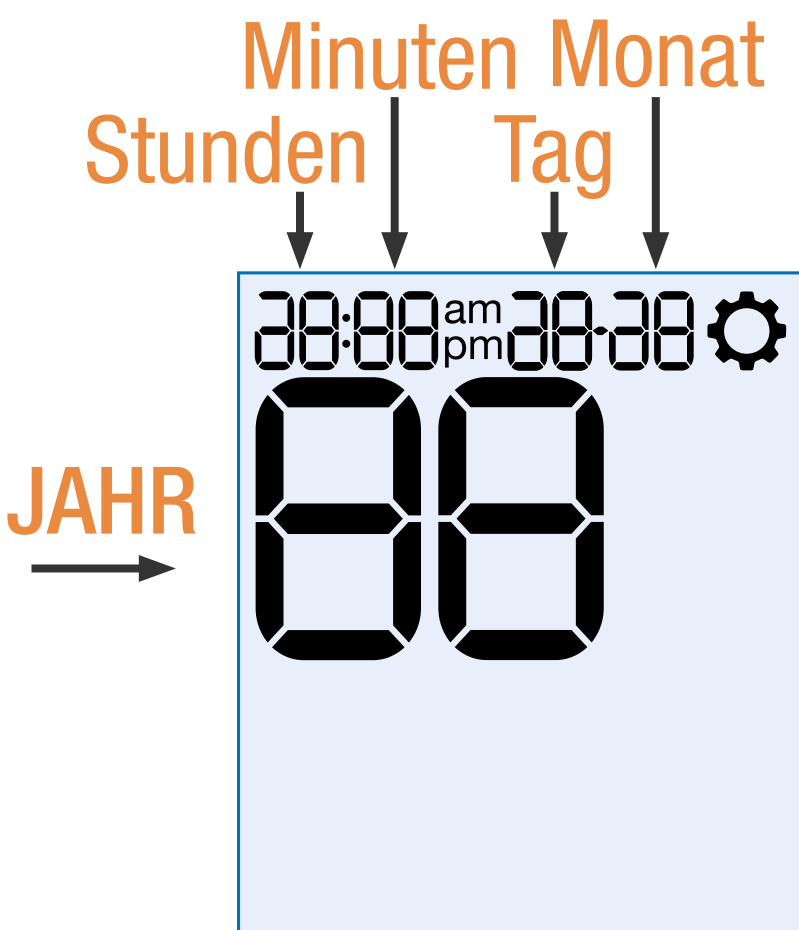




# Verbinden mit der App (optional)

1

Laden Sie die App auf Ihr Mobilgerät herunter (es stehen zwei zur Auswahl).

1. **MedM Health App**

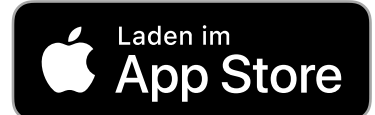


Apple- oder Android-Geräte - Links zu iOS Health - mySugr



**MedM-App-Leitfaden**

2. **BETACHEK Diabetes App**

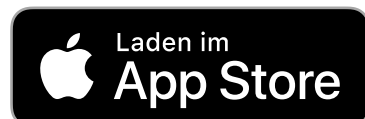


Nur Apple-Geräte



**VIDEO 4**

2

Halten Sie die Tasten S + M so lange gedrückt, bis das Kopplungssymbol angezeigt wird.

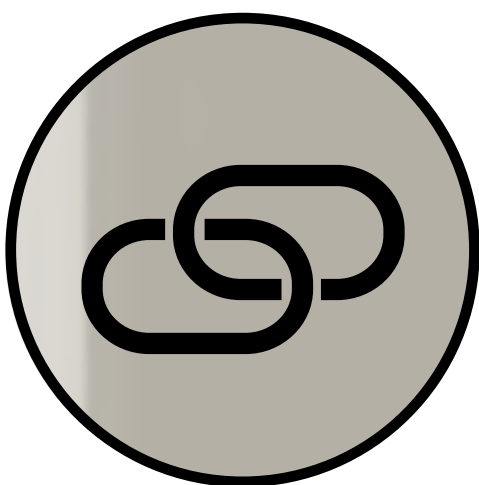


Bei einigen Modellen kann ein anderes Symbol blinken

Öffnen Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät und folgen Sie den Anweisungen.



# Führen Sie einen Test durch

**1** Hände in warmem Wasser waschen

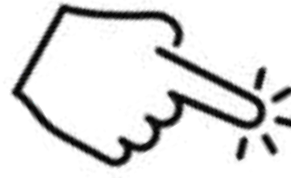

**VIDEO 2**




**2** Trocknen Sie Ihre Hände gründlich ab



**3**

Öffnen Sie die Sensorabdeckung und warten Sie auf das Daumenrad-Symbol:

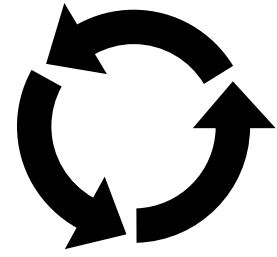

**4**

Drehen Sie das Daumenrad, bis eine Testzone vorhanden ist und auf dem Bildschirm OK angezeigt wird.





5

Drücken Sie den Tiefenwähler fest gegen die ausgewählte Einstichstelle und drücken Sie dann S\*



Ja,  
Sie können  
es noch  
einmal  
versuchen

\* Um dies zu wiederholen, schließen und öffnen Sie die Sensorabdeckung, um die Stechhilfe erneut zu spannen

6



- Drücken Sie vorsichtig einen kleinen runden Blutstropfen aus.
- Halten Sie die Handfläche nach unten gerichtet.
- **Sofort verwenden.** Lassen Sie den Tropfen nicht verlaufen, eintrocknen oder sich ausbreiten.



**7**

**Warten Sie auf den blinkenden Blutstropfen Symbol und tragen Sie dann Blut auf**



**Zielen Sie auf das rote Blinklicht**





Sie können nach unten drücken auf den Blutstropfen, um ihn zu verteilen.



Berühren Sie die Testzone nicht

Bedecken Sie den rot beleuchteten Bereich mit Blut, sonst zeigt das Messgerät **E-7** an oder liefert ein ungenaues Ergebnis. 



Achten Sie darauf, dass kein Blut aus der Testzone auf das Blutzuckermessgerät gelangt



Siehe den Abschnitt über die Reinigung



**Wischen Sie nicht mit einem kleinen Tropfen über die Testzone. Es sollte ein größerer Tropfen verwendet werden.**




**8**

**Ergebnisse in ca. 5 Sekunden**





**9** Drehen Sie das Rändelrad, um den verwendeten Test zu verwerfen. Hören Sie auf, das Daumenrad zu drehen, wenn „OK“ angezeigt wird.

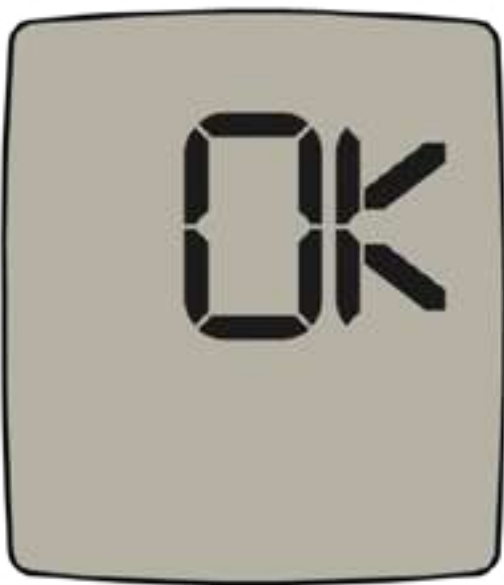

**10** Schließen Sie die Sensorabdeckung. Das Messgerät schaltet sich aus.

**HINWEIS:** Wenn Sie diesen Schritt überspringen, wird **E-3** angezeigt. Öffnen Sie einfach die Abdeckung und führen Sie diesen Schritt aus.





# Reinigen Sie das Messgerät (E-4, E-5, E-9, E-12)

## 1 Entfernen Sie die Kassette:

Drücken Sie auf  
den gebogenen  
Griffbereich

+


heben Sie das  
andere Ende der  
Kassette heraus.



Reinigen Sie das Sensorfenster, wenn Blut auf  
das Blutzuckermessgerät gelangt ist oder wenn  
Sie eine der oben genannten Fehlermeldungen  
erhalten


Entnehmen einer Testkassette

## 2 Reinigen Sie das Sensorfenster mit einem feuchten Wattestäbchen oder einem weichen Linsenreiniger in der angegebenen Richtung.

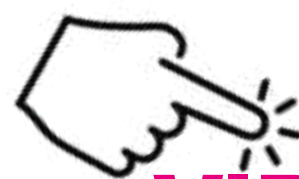

VIDEO 5

# Schlüssel zu Fehlermeldungen

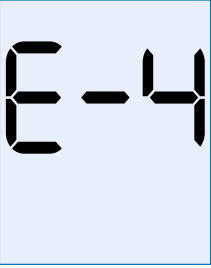	<p><b>Benutzer Test wird nicht in die Abfallkammer gewickelt.</b></p> <p>Öffnen Sie die Sensorabdeckung und drehen Sie das Daumenrad, um den gebrauchten Test in die Abfallkammer zu verschieben.</p>
	<p><b>Blut zu früh aufgetragen oder Sensorfenster verschmutzt.</b></p> <p>Auf die Testzone aufgetragener Blutstropfen, bevor das Blutstropfensymbol auf dem Display erschien. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testzone.</p> <p><b>Sensorfenster verschmutzt.</b> Entfernen Sie die Kassette und reinigen Sie das Sensorfenster.</p>
	<p><b>Zu viel Umgebungslicht oder Sensorfenster verschmutzt.</b></p> <p>Gehen Sie zum Beispiel an einen schattigen Ort oder schatten Sie das Messgerät mit Ihrem Körper ab.</p> <p><b>Sensorfenster verschmutzt.</b> Entfernen Sie die Kassette und reinigen Sie das Sensorfenster.</p>
	<p><b>Daumenrad zu weit gedreht</b></p> <p><b>Das Daumenrad wurde zu weit gedreht, was dazu führte, dass sich die Testzone am Sensor vorbeibewegte.</b></p> <p>Drehen Sie das Rändelrad weiter, bis das Messgerät „OK“ anzeigt. Schließen Sie die Sensorabdeckung, um das Messgerät auszuschalten.</p> <p><b>Kassette beim Aufwickeln des gebrauchten Tests in die Abfallkammer zu weit aufgewickelt.</b></p> <p>Das Daumenrad wurde zu weit gedreht, so dass ein neuer Test aus der Speicherkammer entnommen wurde. Dieser Test muss verworfen werden. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drehen Sie das Rändelrad weiter, bis „OK“ auf dem Display erscheint.</p>
	<p><b>Blutstropfen zu klein oder nicht über dem roten Licht platziert</b></p> <p>Beginnen Sie den Blutzuckertest von vorne mit einem neuen Test. Stellen Sie sicher, dass der durch das rote Licht beleuchtete Bereich mit Blut bedeckt ist.</p>
	<p><b>Testzone beschädigt oder Sensorfenster verschmutzt</b></p> <p>Die Testzone ist beschädigt. Beginnen Sie den Blutzuckertest von vorne mit einem neuen Test.</p> <p><b>Sensorfenster verschmutzt.</b> Entfernen Sie die Kassette und reinigen Sie das Sensorfenster.</p>
	<p><b>„exp“: Testkassette abgelaufen</b></p> <p>Kassette länger als 90 Tage oder nach Ablauf des ungeöffneten Verfallsdatums geöffnet. Kassette ersetzen.</p> <p>Das Messgerät zeigt möglicherweise „Exp“ (Kassette abgelaufen) an, wenn das korrekte Datum nicht im Messgerät eingestellt ist.</p>



**Gehen Sie zur vollständigen Bedienungsanleitung**

- Das BETACHEK C50 Messgerät und die Stechhilfe sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Nicht für den Einsatz bei mehreren Patienten.
- Für das BETACHEK C50 gilt eine 5-Jahres-Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für versehentliche Beschädigungen, normalen Verschleiß oder Missbrauch des Messgeräts. Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an: [support@betachek.com](mailto:support@betachek.com)
- Diese Schnellstartanleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch, das wichtige Zusatzinformationen enthält.



**BETACHEK® C50**